



## SPECIFICHE TECNICHE

- INTERVALLO DI VALORI PRESSIONE SISTOLICA DA 60 A 290 mmHg
- INTERVALLO DI VALORI PRESSIONE DIASTOLICA DA 30 A 195 mmHg
- INTERVALLO DI MISURAZIONE 0,1,2,4,5,6,12 OPPURE 30 MISURAZIONI ALL'ORA
- INTERVALLO DI PRESSIONE STATICA DA 0 A 30 mmHg
- TEMPERATURE DI FUNZIONAMENTO DA +10°C +40°C
- UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO DA 15% A 90%
- METODO DI MISURAZIONE OSCILLOMETRICO
- INTERVALLO DI MISURAZIONE 0,1,2,4,5,6,12 OPPURE 30 MISURAZIONI ALL'ORA
- PROTOCOLLO DI MISURAZIONE 2 GRUPPI DI INTERVALLO MODIFICABILI
- ACCURATEZZA  $\pm 3$  mmHg, NELLA MISURA DEL DISPLAY
- PESO 240 GR (BATTERIE INCLUSE)
- DIMENSIONI 128x75x30 MM
- ALIMENTAZIONE 2 AA NI-MH DA 1,2 V MIN 1500 MAH (AA) O 2 AA 1,5 V
- INTERFACCE VERSO PC BLUETOOTH (CLASSE 1/100 M)


## DESCRIZIONE

WALK200B È UN MISURATORE AMBULATORIALE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA NELLE 24 ORE. SEMPLICE DA USARE, LEGGERO E COMPATTO PER MASSIMIZZARE IL COMFORT DEL PAZIENTE. DISPLAY LCD PER LA VISUALIZZAZIONE DEI VALORI MISURATI E DEI MESSAGGI DI SERVIZIO; CONNETTIVITÀ EVOLUTA VERSO IL PC BASATA SU TECNOLOGIA BLUETOOTH STANDARD; ALGORITMO AUTO ADATTANTE PER IL CONTROLLO DEL GONFIAGGIO DEL BRACCIALE FUNZIONE DI EVENT MARKER E DI INIZIO/FINE PERIODI DI VEGLIA E SONNO; DIMENSIONI CONTENUTE E SILENZIOSITÀ DELLA POMPA. IL SUO SISTEMA DI GONFIAGGIO ADATTIVO RENDE LA CONVIVENZA CON IL DISPOSITIVO PIÙ CONFORTEVOL: IL BRACCIALE INFATTI, ADATTA IL GONFIAGGIO SULLA BASE DEL PROPRIO TREND PRESSORIO, EVITANDO UNA PRESSIONE ECCESSIVA SUL BRACCIO! INDICAZIONI SIIA (SOCIETÀ ITALIANA IPERTENSIONE ARTERIOSA) IN CUI L'ABPM PUÒ ESSERE UTILE: IPERTENSIONE BORDER LINE, SOSPETTA IPERTENSIONE DA CAMICE BIANCO O MASCHERATA, IPERTENSIONE NOTTURNA, AMPIA VARIABILITÀ DELLA PA SIA A BREVE CHE A LUNGO TERMINE, DIABETE, ANZIANI, IPERTENSIONE EPISODICA O IPOTENSIONE (SINTOMATICA), GRAVIDANZA, VALUTAZIONE DI FARMACI, RESISTENZA AL TRATTAMENTO FARMACOLOGICO, SOSPETTA APNEA DURANTE IL SONNO.



### TENSIOMETRO ELETTRONICO AUTOMATICO

UTILIZZATO PER PAZIENTI ANZIANI,  
OBESI E CON ARITMIA

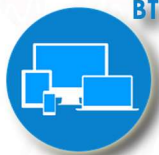

BT/USB

### PC LINK

TRASMISSIONE DEI DATI AL PC  
TRAMITE CONNESSIONE  
USB/BLUETOOTH



### CENTRALE OPERATIVA

ESAMI REFERTATI ESCLUSIVAMENTE  
DA CARDIOLOGI,  
ANCHE IN LINGUA INGLESE



### STRONG SIGNATURE

FIRMA DIGITALE  
UNIVOCA  
LEGALMENTE CERTIFICATA



45'

### REFERTAZIONE CARDIOLOGICA

ENTRO 45' DALLA RICEZIONE,  
H12, TUTTI I GIORNI DELL'ANNO  
SUPERFESTIVI COMPRESI

LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI STRETTAMENTE CONNESSI A QUESTO DEVICE, SONO OFFERTE UNICAMENTE DA CARDIO ON LINE EUROPE SRL